

NICE GLASS



FIABILIDAD Y TECNOLOGIA,
ADAPTABLE A CADA ESTILO.

miglionico
DENTAL EQUIPMENT



MIGLIONICO, TODA UNA HISTORIA ITALIANA

SELECCIONAMOS CUIDADOSAMENTE LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS Y LAS TRANSFORMAMOS PARA CREAR NUESTRAS UNIDADES. TRABAJAMOS CON PASIÓN Y COMPROMISO PARA GARANTIZAR CALIDAD Y FIABILIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO.



Producción interna

Nuestro personal altamente especializado, mediante el uso del software y las tecnologías más innovadoras, crean unidades desde el diseño hasta el control de calidad. Contamos con máquinas CAD/CAM, máquinas de corte por láser, máquinas plegadoras, tornos de control numérico, dispositivos de moldeo de poliuretano y dispositivos de soldadura. La gestión y dirección interna de toda la producción nos permite ofrecer excelentes productos sin dejar de ser muy competitivos y versátiles..



Materiales de alta calidad

La clave de la calidad consiste en la elección de los mejores materiales. Combinamos innovación y solidez para garantizar un producto fiable y resistente. Utilizamos solo materiales excelentes, como el aluminio y el hierro para la estructura interna, poliuretano esmaltado para las superficies externas, vidrio para los paneles y piel sintética para los tapizados. Nuestro objetivo es ofrecerles un producto sólido, fácil de utilizar y de desinfectar, para que nuestros equipos duren a lo largo del tiempo.





NICE GLASS

FIABILIDAD Y TECNOLOGIA, ADAPTABLE A CADA ESTILO

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA FUNCIONALIDAD Y LA SEGURIDAD. SIMPLE Y VERSÁTIL EN EL USO, GRACIAS A SUS CARACTERÍSTICAS Y ALTAS PRESTACIONES Y MÁXIMA HIGIENE.





Todo al alcance de tu mano

El panel del operador es ajustable y está equipado con un negatoscopio integrado. Gracias al movimiento, es posible tener una visión derecha y mejor acceso a la pantalla tanto si se trabaja de pie o sentado. La pantalla multifunción con tecnología táctil incorpora una pantalla de vidrio y está encapsulada en una estructura de poliuretano esmaltado. Mínimo esfuerzo para higienizarlo, máxima seguridad en el utilizzo.

Dando espacio a tus necesidades

El lado del operador está diseñado para garantizar la máxima ergonomía y facilitar el movimiento. El brazo tiene un amplio movimiento que permite colocar la consola en la posición de trabajo más funcional, manteniendo sus dimensiones reducidas. La consola, diseñada para albergar hasta 6 instrumentos, está equipada con una activación automática del sensor cuando cada pieza de mano se retira de su posición. Además, incluye un tapete de silicona extraíble y esterilizable en autoclave.

Brazo auto balanceable con bloqueo automático.

Mangueras extra largas (96 cm). Auto balanceables y sin tracción en la versión colibrí.

Consola del operador en poliuretano y predispuesta para acomodar 6 instrumentos.

Bandeja de acero con rotación de 360 grados. Disponible en tres medidas.



Asas ergonómicas gracias a dos opciones de montaje diferentes, extraíbles y esterilizables.

Brazo bajo para reducir las dimensiones y facilitar el movimiento del instrumento.





Solo elegimos excelencia

La consola del operador, dispuesta para 6 instrumentos puede ser personalizada según las necesidades de cada operador. Todos los módulos se crean en colaboración con los principales fabricantes de componentes del sector para garantizar la mejor fiabilidad y tecnología. Los mejores partners para ofrecer siempre los mejores productos.

INSTRUMENTOS



MICROMOTOR



JERINGA DE ACERO



MÓDULO TURBINA



LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN



ULTRASONIDOS



CÁMARA INTRAORAL



SEGUNDO MICROMOTOR



SEGUNDO MÓDULO TURBINA

- 7 posiciones memorizables + memoria de la última posición
- Movimiento del sillón
- Posición de Trendelenburg
- Velocidad del micromotor y inversión del micromotor
- Activación de la bomba peristáltica

- Agua en la escupidera
- Encendido/apagado de la lámpara
- Gestión de la lámpara
- Llamada asistente / apertura de puerta
- Negatoscopio
- Activación del agua fría y caliente en vaso



Simplicidad en los comandos

La gestión de la unidad dental es simple e intuitiva gracias a los iconos de pantalla de cristal. Con un simple toque, es posible activar todas las funciones de la unidad y establecer los parámetros deseados. Fácil de desinfectar gracias a la función de bloqueo temporizado.



El aliado perfecto

La pantalla de la consola del asistente, fabricada en vidrio y es táctil: las teclas permiten administrar el equipo con un simple toque. El brazo del asistente está dotado de dos cánulas para succión quirúrgicas y además, está diseñado para incorporar una jeringa y una lámpara de polimerizar. Todos los instrumentos se activan automáticamente y se colocan en soportes extraíbles y autoclavables. El grupo hídrico es compacto y funcional gracias al movimiento tanto de la escupidera como de la bancada.

CONFIGURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

STANDARD



CÁNULAS DE ASPIRACIÓN



OPTIONAL



JERINGA DE ACERO INOX



LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN



Comandos y configuración

La consola del asistente, intuitiva y multifuncional, permite el movimiento de la silla, la activación y temporización del agua caliente o fría en el vaso, el enjuague en la escupidera, el encendido o el apagado de la lámpara del operador y la recuperación de las posiciones. La consola estándar incluye dos cánulas de succión. Y además, es posible agregar dos carcasas adicionales para la lámpara de polimerización y la jeringa.

Libertad de movimiento

El panel del asistente está montado sobre un brazo de doble articulación que permite gestionar mejor el área de trabajo, ya sea trabajando solo o con un asistente. La posibilidad de manipular el espacio cerca del paciente y del grupo hídrico, utilizando el asa colocada en el panel, permite una amplia libertad de movimiento y en los procesos de asistencia al paciente. La comodidad del paciente durante el proceso de enjuague está en perfecta armonía con la del asistente gracias a la escupidera con rotación 180°. Fácil de manejar, extraíble y esterilizable.



Grupo hídrico

Diseñado para simplificar al máximo la rutina de mantenimiento, el grupo hídrico del Nice Glass está equipado con una práctica abertura deslizante. Simplemente, la cubierta gira para tener fácil acceso a los componentes hidráulicos y electrónicos, adecuadamente separados para garantizar la seguridad y la comodidad. El corazón tecnológico del equipo está ubicado en un espacio compacto y funcional.





Sillón SYNCRO

Acolchado con un sistema de confort y cubierto con cuero sintético. El sillón tiene una amplia gama de movimientos operativos y, gracias al movimiento independiente y sincronizado del respaldo, el asiento y el reposapiés garantizan una flexibilidad integral. El sillón está equipado con 4 sistema de seguridad anti-aplastamiento.

					
COD. 920 RENOIR	COD. 902 GIOTTO	COD. 904 KOSTABI	COD. 905 GAUDI	COD. 906 KLIMT	COD. 919 BOTTICELLI
					
COD. 909 MATISSE	COD. 908 VAN GOGH	COD. 950 BOTERO	COD. 923 MODIGLIANI	COD. 924 MIRÒ	COD. 910 RAFFAELLO
					
COD. 914 CARAVAGGIO	COD. 922 DALÌ	COD. 915 LEONARDO	COD. 911 MICHELANGELO	COD. 6001 DEGAS	COD. 8017 MONET

Colores adicionales disponibles bajo pedido.

LA BELLEZA DEL CONFORT

Los detalles

Pequeños detalles para mejorar la calidad de su trabajo.



REPOSACABEZAS

Ajustable en altura y ajustable según 3 ejes, de cuero skay.



REPOSABRAZOS

La unidad está equipada con un confortable y funcional apoyabrazos de goma en la izquierda.



RESPALDO ANCHO

Ideal para trabajar en la posición de las 12 horas.



RESPALDO ESTRECHO

Ideal para trabajar en la posición de las 9 horas o de pie.

Respaldos

Respaldo ergonómico con soporte lumbar y depresiones diseñado para garantizar el confort y adaptabilidad del paciente.



COJÍN PROTECTOR

Práctico y discreto, combinado con la tapicería, evita el desgaste y protege el cuero del asiento.



COJÍN REDUCTOR PARA NIÑOS

Mayor confort incluso para los más pequeños. El cojín eleva el asiento facilitando la operatividad.

Los accesorios

Proteje tu unidad dental y haz que sea más cómoda para tus pacientes pediátricos.





VERSATILIDAD Y ERGONOMÍA

CONFIGURACIÓN COLIBRÍ



CONFIGURACIÓN DE MANGUERAS COLGANTES



CONFIGURACIÓN PARA ZURDOS



CONFIGURACIÓN EQUIPO + CARRITO



Conforme con tu estilo

6 configuraciones diseñadas para adaptarse a las diferentes formas de trabajo

CONFIGURACIÓN SOLO CARRITO




CONFIGURACIÓN SALA QUIRÚRGICA



Optimiza tus espacios

Las dimensiones reducidas y los movimientos grandes hacen que nuestra unidad dental sea extremadamente cómoda de usar tanto sola como con un asistente.

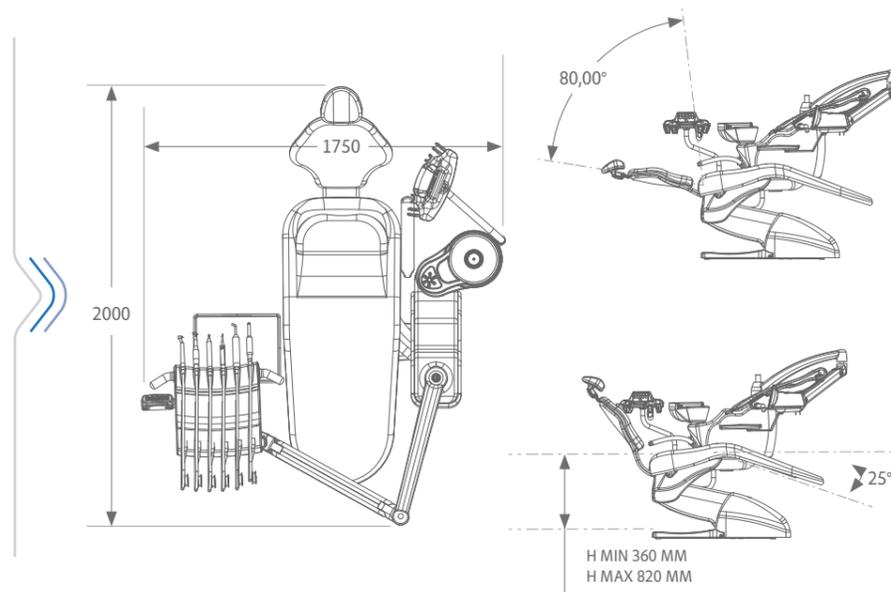

Kit multimedia

La tecnología es un asistente válido. Sean cuales sean sus necesidades en multimedia, existe una solución configurable. Podemos ofrecer soluciones personalizadas para sistemas de multimedia integrados.



Lámpara del operador

Para nuestras lámparas, un partner de excelencia, puedes escoger entre luz halógena o LED la lámpara Faro que más te convenga.



EDI
Halogen



MAIA
Led 35000 Lux



ALYA/THEIA TECH
Led 50000 Lux

Pedal multifunción

Un aliado valioso para controlar vuestra unidad. Dos tipos de pedales disponibles: estándar y push. Los dos pueden ser Wi-Fi (opcional).



STANDARD



PUSH



Taburetes

Tu comodidad, ante todo. Taburetes con cojines anatómicos sin costuras y en cuero sintético, con ajuste de altura y ruedas autofrenantes. Disponible en cuatro modelos.




Partes extraíbles y autoclavables

Los procedimientos de desinfección deben ser simples, rápidos y efectivos. Las unidades dentales Miglionico están diseñadas para optimizar el tiempo y garantizar una higiene constante y efectiva.



ALFOMBRILLA DE SILICONA

MANILLAS DE CONSOLA DEL OPERADOR DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

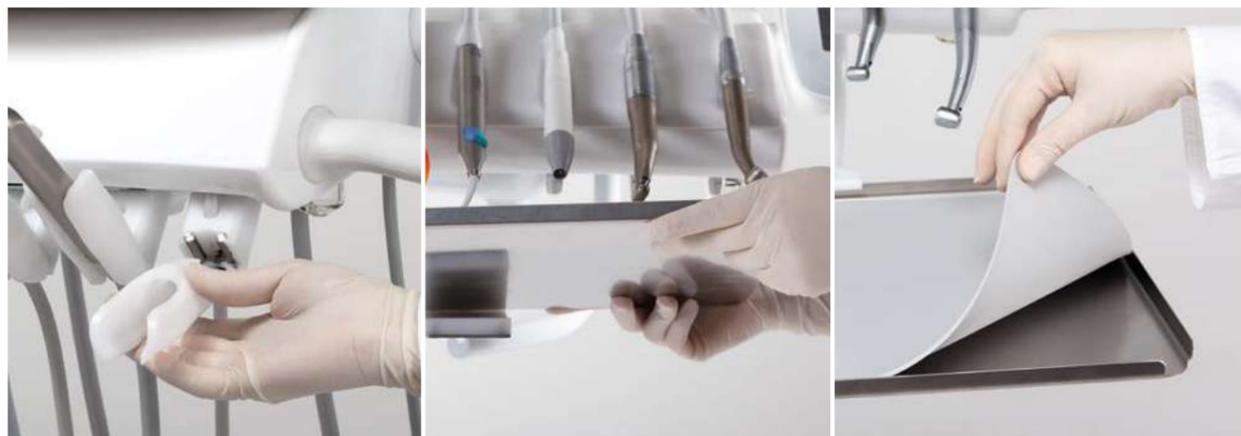

SOPORTE DE RESINA PARA LOS INSTRUMENTOS

PORTABANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA DE SILICONA



ESCUPIDERA*

DISPENSADORES DE AGUA DE RESINA Y ACERO INOXIDABLE

SOPORTE DE LOS INSTRUMENTOS DE LA CONSOLA DEL ASISTENTE

* No se puede esterilizar en autoclave

HIGIENE SOBRETUDO


Activación de los sistemas de higiene

Elige entre las diversas soluciones estándar y opcionales la más adecuada para respaldar tu trabajo de manera segura.

ESTÁNDAR



SISTEMA DE RETRACCIÓN ANTIFLUIDOS EN LOS INSTRUMENTOS

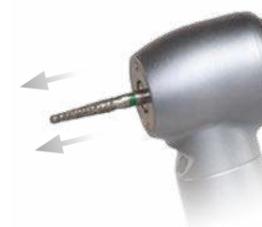

SISTEMA SEGURO DE FLUJO DE AIRE DE LOS INSTRUMENTOS

OPCIONALES



SISTEMA DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS CIRCUITOS HÍDRICOS PARA LAS PIEZAS DE MANO (MDS) Y SISTEMA DE DESINFECCIÓN INTENSIVA DE LOS CIRCUITOS HÍDRICOS PARA LAS PIEZAS DE MANO (MDS+)




BOMBA PERISTÁLICA PARA RIEGO EXTERNO



SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA INDEPENDIENTE POR BOTELLA SEPARADA DENTRO DE LA UNIDAD + BYPASS


SISTEMAS INTEGRADOS PARA LA ASPIRACIÓN

ASPIRACIÓN HÚMEDA

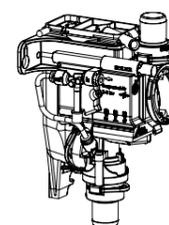


VÁLVULA DE DRENAJE DE LA ESCUPIDERA

ASPIRACIÓN SECA

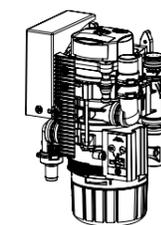

SEPARADOR DE AMÁLGAMA

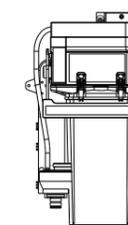

SEPARADOR AIRE/AGUA

Adaptabilidad a todo sistema de aspiración

Predisposición estándar para la aspiración húmeda. Accesorios disponibles para la integración al sistema de aspiración seca y dispositivos para el respeto de la ley sobre la eliminación de la amalgama.



miglionico

DENTAL EQUIPMENT



CONFIGURA
TU
EQUIPO



MIGLIONICO s.r.l.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel (+39) 080 759552
Info@miglionico.net

Para descubrir nuestra gama de
productos y todos los accesorios
visita nuestro sitio web
www.miglionico.eu

